


ROKAE 珞石
轻型工业机器人专家

xMate ER3 Pro
硬件安装手册

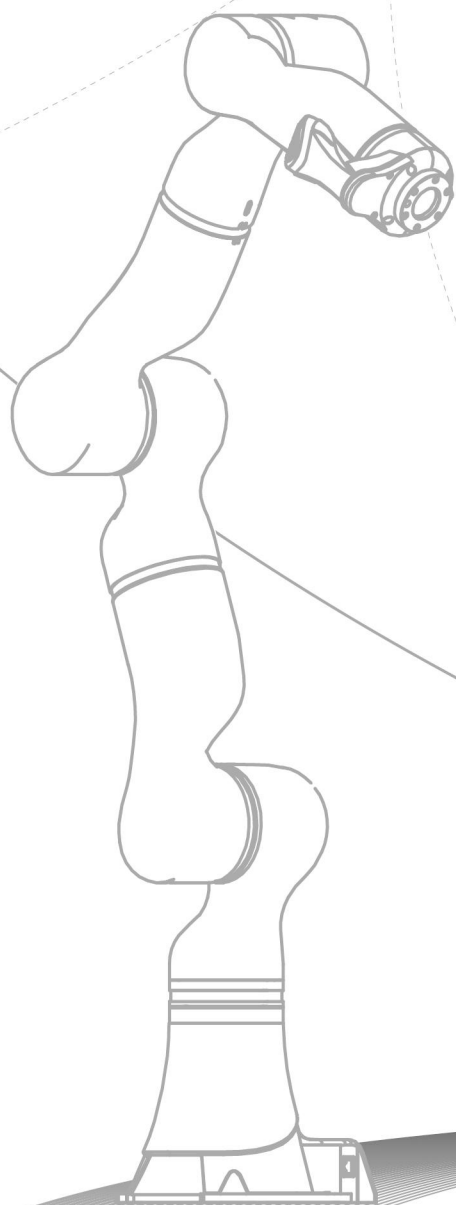

xMate ER3 Pro

硬件安装手册

文档编码：DOC-00001759

文档版本：B

本手册中记载的内容如有变更，恕不事先通告。本公司对手册中可能出现的错误均不承担任何责任。

本公司对因使用本手册及其中所述产品而引起的意外或间接伤害均不承担任何责任，敬请谅解。

本公司不可能预见所有的危险和后果，因此本手册不能警告用户所有可能的危险。

禁止擅自复印或转载本手册的部分或全部内容。

如您发现本手册的内容有误或需要改进抑或补充之处，请不吝指正。

本手册的原始语言为中文，所有其他语言版本均翻译自中文版本。

©版权所有 2015-2023 ROKAE 保留所有权利

珞石（山东）智能科技有限公司

中国.山东

目录

1 手册概述.....	5
1.1 关于本手册	5
1.2 手册对象	5
1.3 如何阅读产品手册	5
1.4 本手册中的插图	5
1.5 相关产品文档	5
1.6 垂询方式	5
2 安全.....	6
2.1 简介	6
2.1.1 安全责任说明	6
2.1.2 拟定用途	6
2.2 安全声明	6
2.3 安全设备	7
2.3.1 紧急停止	7
2.3.2 使能开关	7
2.4 机器人紧急停止类型	8
2.4.1 紧急停止	8
2.5 工作中的安全事项	8
2.5.1 操作人员安全	8
2.5.2 从急停状态恢复	8
2.5.3 手动模式的安全事项	8
2.5.4 自动模式的安全事项	9
2.6 作业人员及内容要求	9
2.6.1 作业人员定义	9
2.6.2 作业人员要求	10
2.6.3 作业内容要求	10
2.7 安全培训	11
2.7.1 概述	11
2.7.2 作业人员的安全	11
2.8 使用前评估	12
3 产品概述.....	13
3.1 简介	13
3.2 机器人	13
3.2.1 概述	13
3.2.2 机器人系统	13
3.2.3 转动方向与坐标系定义	14

3.3 标志和标签	15
4 技术规格	16
4.1 简介	16
4.2 技术参数	16
4.3 工作空间	17
4.4 手腕最大允许负载曲线	17
5 开箱与安装	19
5.1 简介	19
5.2 安装流程表	19
5.3 环境条件	19
5.4 开箱与硬件安装	20
5.4.1 开箱	20
5.4.2 机器人运输角度与搬运部位	21
5.4.3 安装前检查	21
5.5 现场安装	22
5.5.1 搬运	22
5.5.2 安装机器人	22
5.5.3 法兰	25
5.5.4 电源适配器	26
6 电气连接	27
6.1 电气布局	27
6.2 本体底座	27
6.2.1 本体电源输入	28
6.2.2 本体上电	29
6.2.3 手持急停使能手柄接口	29
6.2.4 通用 DIO	29
6.2.5 安全 DIO	31
6.2.6 扩展 EtherNet 口	34
6.2.7 EtherCAT 伺服驱动调试口	34
6.2.8 把手功能按键	34
6.2.9 工具接口	35
6.3 电源适配器	37
6.3.1 电源适配器上电	37
6.3.2 电源输入	37
6.3.3 电源输出	38
7 维护	39
7.1 简介	39
7.2 关于维护时的安全	39

7.3 维护概要	39
7.3.1 电池的更换	39
7.4 维护计划	41
7.5 检查	41
7.6 清洁	41
8 零点标定	43
8.1 简介	43
8.1.1 概述	43
8.1.2 什么是机械零点	43
8.1.3 什么是零点标定	43
8.1.4 何时需要零点标定	43
8.2 标定方法	43
8.2.1 软标定	43
8.2.2 机械标定	44
9 停用	47
9.1 停用机器人	47
9.2 电池	47
9.3 回收	47
10 修订记录	48

1 手册概述

1.1 关于本手册

感谢您购买本公司的机器人系统。

本手册记载了正确安装使用机器人的以下说明：

- 机器人的机械和电气安装。
- 机器人的维护及校准。

安装使用该机器人系统前，请仔细阅读本手册与其他相关手册。

阅读之后，请妥善保管，以便随时取阅。

1.2 手册对象

本手册面向：

- 安装人员。
- 维护人员。

请务必保证以上人员具备机械、电气安装和维护所需的知识，并已接受本公司的相关培训。

1.3 如何阅读产品手册

本手册包含单独的安全章节，必须在阅读安全章节后，才能进行安装或维护作业。

1.4 本手册中的插图

由于产品升级或其他原因，产品手册中的一些图片可能会与实际产品存在差异，但操作步骤是正确的。

同时，对于某些通用的信息，可能会使用其他型号机器人的图片进行说明。

1.5 相关产品文档

本手册为xMate ER3 Pro机器人的产品手册，应与以下手册同时使用：

- 《xCore 机器人控制系统使用手册》

1.6 垂询方式

机器人维护、维修等相关事项，请与本公司售后部门或当地经销商联系。

联系时，请准备好如下信息：

- 机器人型号/序列号
- 软件名称/版本
- 系统出现的问题

2 安全

2.1 简介

本章介绍在使用xMate ER3 Pro机器人时需要注意的安全原则和流程，在第一次通电前，xMate ER3 Pro机器人的集成商必须仔细阅读并理解这些信息。

与机器人外部安全防护装置的设计、安装有关的内容不在本章描述范围之内，请与您的系统集成商联系以获得此类信息。

2.1.1 安全责任说明

珞石机器人致力于提供可靠的安全信息，但不对此承担责任。即使一切操作都按照安全操作说明进行，也不能确保xMate ER3 Pro机器人不会造成人身和财产方面的损失。

除安全章节外，请注意在文档的必要部分有其他的安全提示。

2.1.2 拟定用途

xMate ER3 Pro机器人的使用应符合当地的法律法规，不允许违规使用在违背法律法规的用途上。

按规定使用机器人还包括遵守各单个部件的产品手册说明，包括对其描述的操作、安装、维护说明等内容。

以下违规的使用应被禁止：

- 运输人员和动物
- 在有爆炸危险的环境中使用
- 在可燃性环境中使用
- 在允许的范围之外使用
- 在井下使用

xMate ER3 Pro机器人是协作机器人，拟用作操纵工具/末端执行器和夹具，或用于加工或传递零件或产品。xMate ER3 Pro机器人具备特殊的安全相关特征，这些特征是特地为协同操作而设计的，也就是说机器人系统可以在没有护栏的情况下工作，或者和人类一起工作。协同操作仅针对无危险的应用，即包括工具/末端执行器、工件、障碍物及其他机器在内的经过特定应用的风险评估证明不具备任何重大危险的完整应用。

任何与拟定用途相违背的用途或应用都是不允许的，

这包括但不限于以下内容：

- 用于潜在性爆炸环境
- 用于医疗和生命攸关的应用
- 未作风险评估就使用的
- 超出规定的规格使用
- 作为攀登用具使用的
- 在允许的操作参数之外进行操作

2.2 安全声明

- 操作控制机器人需提前评估安全风险，并按照本文档提及的安全规范使用机器人。
- 使用 RCI 由外部控制器控制机器人时，机器人控制过程的安全保护需要由外部控制器实现，由于外部控制器安全功能缺失导致的人员、设备安全问题，不属于机器人安全管理范围。
- 对机器人使用过程存在不确定的风险需咨询珞石公司技术支持人员，非建议情况使用出现问题不在支持范围。

2.3 安全设备

2.3.1 紧急停止

2.3.1.1 紧急停止的定义

紧急停止是机器人系统中优先级最高的功能。按下紧急停止按钮将触发急停，此时所有其他的机器人控制功能将停止，机器人停止运动且各关节电机的动力电将被切断，控制系统切换紧急停止状态，在释放急停之前该状态将一直保持。
如需恢复运行，需先释放急停按钮，各关节电机才能执行上电指令。



提示

不能将紧急停止作为正常的程序停止，否则将对机器人的抱闸系统和传动系统造成额外而不必要的磨损，降低机器人的使用寿命。

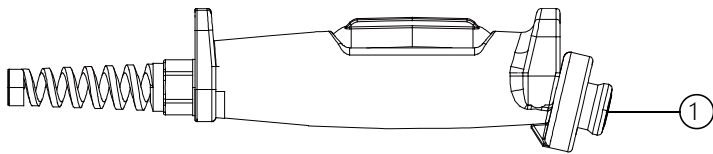


图 2-1 手持急停使能手柄上的急停按钮

标号	名称
1	急停按钮

2.3.2 使能开关

2.3.2.1 使能装置

使能装置（Enabling Device）是一个具有 2 段按压 3 个位置的特殊开关，又称三位使能开关（以下简称使能开关），用于在手动模式下控制机器人的关节动力电源的通断，由此来实现机器人的运动使能。

只有按下使能开关并保持在中间位置时才会接通电机电源，使得机器人处于允许运动的状态，松手放开或者用力按压到底都会将电源切断。

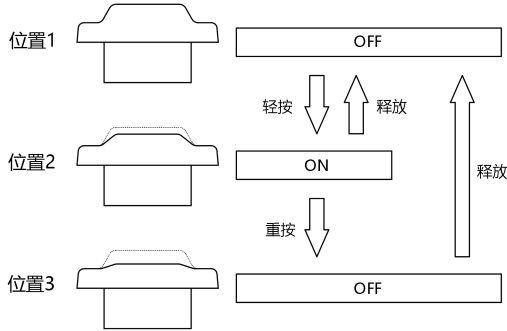


图 2-1 使能按键位置状态



提示

手动模式下，使能开关当按压到中间位置时电机动力电源接通，系统处于 Motor On 状态，可以进行 Jog 或者运行程序。松开或者按到底时电机动力电切断，系统回到 Motor Off 状态。

为了安全的使用机器人，必须遵守以下要求：

- 在任何情况下都必须保证使能开关可以正常工作；

- 在编程和调试期间，当不需要机器人运动时应尽快松开使能开关；
- 任何进入机器人工作空间的人员必须随身携带手持使能，以避免其他人在内部人员不知情的情况下启动机器人。

**警告**

严禁使用外部装置将使能开关卡住使其停留在中间位置

2.4 机器人紧急停止类型

2.4.1 紧急停止

根据安全规范 ISO 13850 和 IEC 60204，机器人用到的停止类型分为：

- STOP0，机器人电机下电，同时抱闸闭合。
- STOP1，机器人通过规划停止运动，再执行电机下电抱闸闭合

xMate ER3 Pro机器人 STOP0 用于 RCI 外部控制时碰撞检测处理，以及手持急停信号处理。

2.5 工作中的安全事项

2.5.1 操作人员安全

2.5.1.1 基本原则

必须遵守以下几条简单的原则以便安全的操作机器人：

- 当有工作人员处于机器人的安全防护区域内时，只能使用手动模式操作机器人；
- 当您进入机器人的安全防护区域时，必须要将手持急停使能手柄拿在手上，以确保机器人在您的控制之下；
- 留意安装在机器人上的会活动工具，在靠近机器人之前，要确保这些工具已经停止运行；
- 留意机器人抓手及所抓持的物品。如果抓手打开，工件有可能会掉落造成人员受伤或者设备损坏。此外机器人使用的抓手可能非常强力，如果不按规范使用也可能造成伤害；

2.5.2 从急停状态恢复

2.5.2.1 说明

系统处于急停状态时必须执行复位操作以便回复到正常状态。复位过程非常简单但是非常重要，它保证了机器人系统不会以危险状态投入到生产运行中。

2.5.2.2 急停按钮及复位

急停按钮位于手持急停使能手柄的手柄上，有一个安全锁机制，被按下后必须手动释放来复位装置的急停状态。按照按钮表面的旋转方向标识旋转按钮，即可释放急停状态。

2.5.3 手动模式的安全事项

2.5.3.1 关于手动模式

在手动模式机器人的运动处于手动控制下。只有在使能开关处于中间位置时，才能对机器人进行 Jog 或者运行程序。

手动模式用于编写、调试机器人程序以及参与工作站试运行调试。

2.5.3.2 手动模式下的速度限制

在手动模式下，机器人末端的运动速度被限制在 250 mm/s 以下，即无论是 Jog 机器人还是运行程序，机器人的最大运动速度不会超过 250 mm/s，不论程序中设置的速度是多少。


2.5.3.3 旁路外部安全信号

在手动模式下，外部安全装置如安全门、安全光栅等信号将被旁路，即在手动模式下即使安全门被打开系统也不会处于急停状态，以方便进行调试。

2.5.4 自动模式的安全事项

2.5.4.1 关于自动模式

自动模式用于在正式生产过程中运行机器人程序。
自动模式下使能开关将被旁路，因此机器人可以在没有人员参与的情况下自动运行。

 危险

自动模式下, 机器人会按照用户程序中设定的速度运动, 机器人末端最高速度可达到 2m/s, 请注意此模式下, 人员不可进入机器人运动范围, 否则极有可能会发生人员损伤。

2.5.4.2 启用外部安全信号

外部安全信号如安全门、安全光栅等在自动模式下会启用，安全门打开会触发紧急停止。

2.5.4.3 安全处理生产中的故障

绝大多数情况下，机器人都属于一条生产线的一部分，因此机器人出现故障往往不只影响机器人工作站本身，同样的当生产线其他部分出现问题时也可能会影响到机器人工作站。因此应由对整个生产线非常熟悉的人员来设计故障补救方案，以提高安全性。


例如在某条生产线上，机器人需要从传送带上抓取工件。如果机器人出现故障，为了保证生产过程不中断，在检修机器人的同时传送带保持运行，此时机器人维修人员应该额外考虑在运行中的传送带旁边工作的安全措施。

再比如一个焊接机器人需要进行例行维护而将该机器人从生产线上脱离出来时，也必须停止为该机器人上料的机器人，以免造成人员伤害。


2.6 作业人员及内容要求

2.6.1 作业人员定义

- 作业人员可分为以下三类：
- 操作人员
操作人员可进行机器人电源的开关，可通过示教器或其他界面启动机器人程序。
 - 调试人员
调试人员可进行机器人操作，可进入安全防护区域内，可对机器人进行设置、示教、编程等操作。
 - 维护人员
维护人员可进行机器人操作，可进入安全防护区域内，可对机器人进行设置、示教等操作，可对机器人进行调整、维修等操作。

 警告

可进入安全防护区域内的调试、维护人员，必须提前接受并通过机器人的专业培训。

 警告

在进行机器人操作、编程、维护时，作业人员必须注意安全，应根据实际情况，选择穿戴必要的物品进行作业，包括适合作业内容的工作服、安全鞋、安全帽等。

2.6.2 作业人员要求

2.6.2.1 操作人员要求

操作人员应满足如下条件：

- 操作人员的年龄应该在当地合法用工年龄范围内。
- 操作人员应具备良好的身体条件。良好的身体条件包括：良好的视力（可佩戴眼镜或隐形眼镜）、良好的听力、良好的协调能力。操作人员在工作期间不能服用可能降低心智水平的物品（如药物、酒精、毒品等）。
- 理解当地适用的安全法规，如工作安全卫生法规、工伤事故预防法规等。

2.6.2.2 调试人员要求

调试人员应符合操作人员的标准，另外，调试人员还应满足如下条件：

- 调试人员应具备基本的技术知识，能理解机器人相关的技术文件和技术图纸，能按手册文件完成其工作任务。
- 调试人员需对机器人系统的使用非常熟悉，能根据实际需求通过操作机器人合理的实现目的。

2.6.2.3 维护人员要求

维护人员应符合操作人员的标准，另外，维护人员还应具备一定的其他专业知识（如电气、机械、气动等），能按手册文件完成其工作任务。

2.6.3 作业内容要求

2.6.3.1 安装、操作的安全要求

- 在搬运、安装机器人设备时，需按照本公司手册说明的方法进行，否则有可能由于错误操作导致机器人翻倒，进而导致作业人员伤亡或设备损坏。
- 机器人设备安装好后首次使用时，务必先以低速进行，然后逐渐加快速度，不可首次就使用高速运行。
- 程序和系统变量等信息默认保存在控制柜存储设备中，为了预防由于意外引起的数据丢失，建议用户定期进行数据备份。

2.6.3.2 调试的安全要求

调试时尽可能在安全防护区域外进行，当必须在安全防护区域内进行调试时，应着重注意下列事项：

- 仔细查看安全防护区域内的情况，确认没有危险再进入安全防护区域。
- 应确认安全防护区域内的所有调试人员的位置。
- 应在确认整个系统的状态后进行作业。
- 要做到随时都可以按下急停按钮。
- 应以低速运行机器人。

调试结束后，调试人员务必在安全防护区域外进行操作。

2.6.3.3 维护的安全要求

- 仔细查看安全防护区域内的情况，确认没有危险再进入安全防护区域。
- 应确认安全防护区域内的所有维护人员的位置。
- 当接通电源时，部分维护作业有触电的危险，应尽可能先断开机器人设备及系统电源，再进行维护作业。
- 维护作业时应避免其他人员无意中接通电源。
- 在进行作业时，不要将身体任何部位搭放在机器人设备的任何部分，以免造成不必要的人身伤害或对设备造成不良影响。
- 进行维护作业时，应配备适当的照明器具。
- 如需更换部件，务必使用本公司指定部件。若使用指定部件以外的部件，有可能导致机器人设备的损坏。
- 在更换部件时拆下来的零件（如螺钉），应正确装回其原来部位，如果发现零件不够或零件有剩余，则应再次确认并正确安装。

2.7 安全培训

2.7.1 概述

现场操作人员、调试人员、维护人员必须经过正规的机器人安全及操作培训，并考核合格后，才能对机器人进行操作、调试和维护。禁止非专业人员、培训未合格的人员操作、调试或维护机器人，以免对作业人员和机器人设备造成严重损害。

设备的所有作业人员都应做到：

- 判断设备的当前状态，保证设备当前处于无故障的情况，才对机器人设备进行操作、调试等作业。
- 当遇到紧急事件时，能选择最安全的方式处理，最大限度降低生命和财产损失。
- 充分理解本公司的产品手册文件，按文件的要求对设备进行作业。

2.7.2 作业人员的安全

下面列出一一般性注意事项，请考虑采取以确保作业人员的安全：

- 在设备运行时，即使机器人看上去已经停止，也有可能是因为机器人在等待启动信号而处在即将运行的状态。此状态也应该视为设备处在操作状态。
- 外围设备均应进行良好的接地。
- 应尽可能地将外围设备安装在机器人工作范围之外。
- 应采用在地板上画线等方式来标清机器人设备的动作范围。

2.7.2.1 操作人员的安全

操作人员不可进入安全防护区域内作业：

- 应在安全防护区域外进行机器人操作。
- 为了防止无关人员误入安全防护区域，应设置防护栏或安全门。
- 不需要操作机器人时，应断开电源，或者按下急停按钮。
- 应在操作人员伸手可及范围之内设置急停按钮。

2.7.2.2 调试人员的安全

在进行调试作业时，某些情况下需要进入机器人的工作范围内，此时尤其要注意安全：

- 在进行调试作业之前，应确认设备处在安全状态。
- 应事先确认安全装置（如急停按钮）的位置和状态。
- 应特别注意，勿使其他人员进入机器人工作范围内。
- 在机器人启动前，应充分确认机器人工作范围内没有人员。

在调试结束后，务必按照下列步骤执行测试运转：

- 在低速下，单步执行程序至少一个循环，确认没有异常。
- 在低速下，连续运行程序至少一个循环，确认没有异常。
- 在实际应用的运转速度下，连续运行程序至少一个循环，确认没有异常。

2.7.2.3 维护人员的安全

为了确保维修人员的安全，应充分注意下列事项：

- 进行维修作业前，应确认外围设备处在安全状态。
- 进行维修作业前，应尽可能先断开设备电源。应根据需要先用锁等锁住主断路器，以避免其他人员无意中接通电源。
- 当迫不得已必须要在通电的情况下进入机器人工作范围内时，应在按下急停按钮再进入。维护人员应挂上“正在维修”的标牌，以避免其他人员无意中操作设备。
- 在机器人运动过程中，切勿进入机器人的工作范围内。
- 当机器人工作范围内有其他人员时，切勿执行自动程序运行。
- 进行维护作业时应在设备旁边配置一名熟悉机器人系统、能够察觉危险的人员，使其在紧急情况下可以按下急停按钮。
- 在更换部件或重新组装时，应注意避免异物粘附或者异物混入。
- 在检修机器人内部时，如要接触到电源单元、印刷电路板等时，为了预防触电，务必先断开机器人的电源，再进行作业。

2.8 使用前评估

首次使用机器人或进行任何修改之后，必须进行以下测试。确认所有安全输入和输出是正确的，并且连接正确。测试所有连接的安全输入和输出是否功能正常。包含如下测试评估：

- 测试手持急停使能手柄的急停按钮是否可以停止机器人并启动抱闸。
- 测试操作模式是否可以手动、自动切换。
- 测试 3 档位手持急停使能装置是否必须按下才能在手动模式下启动动作，并且机器人处于减速控制下。

3 产品概述

3.1 简介

xMate ER3 Pro柔性协作机器人是以高灵敏度力觉感知以及高动态力控为工业生产力提升助力的新一代柔性协作机器人。

3.2 机器人

3.2.1 概述

xMate ER3 Pro机器人基本配置：

产品名称	最大负载	工作半径	本体重量
xMate ER3 Pro	3kg	1010mm	约 22kg

3.2.2 机器人系统

xMate ER3 Pro新一代柔性协作机器人系统由机器人系统（本体及集成控制器）、手持急停使用手柄、电源适配器及线缆、其他接口附件等组成，详见图 3-1 机器人系统：

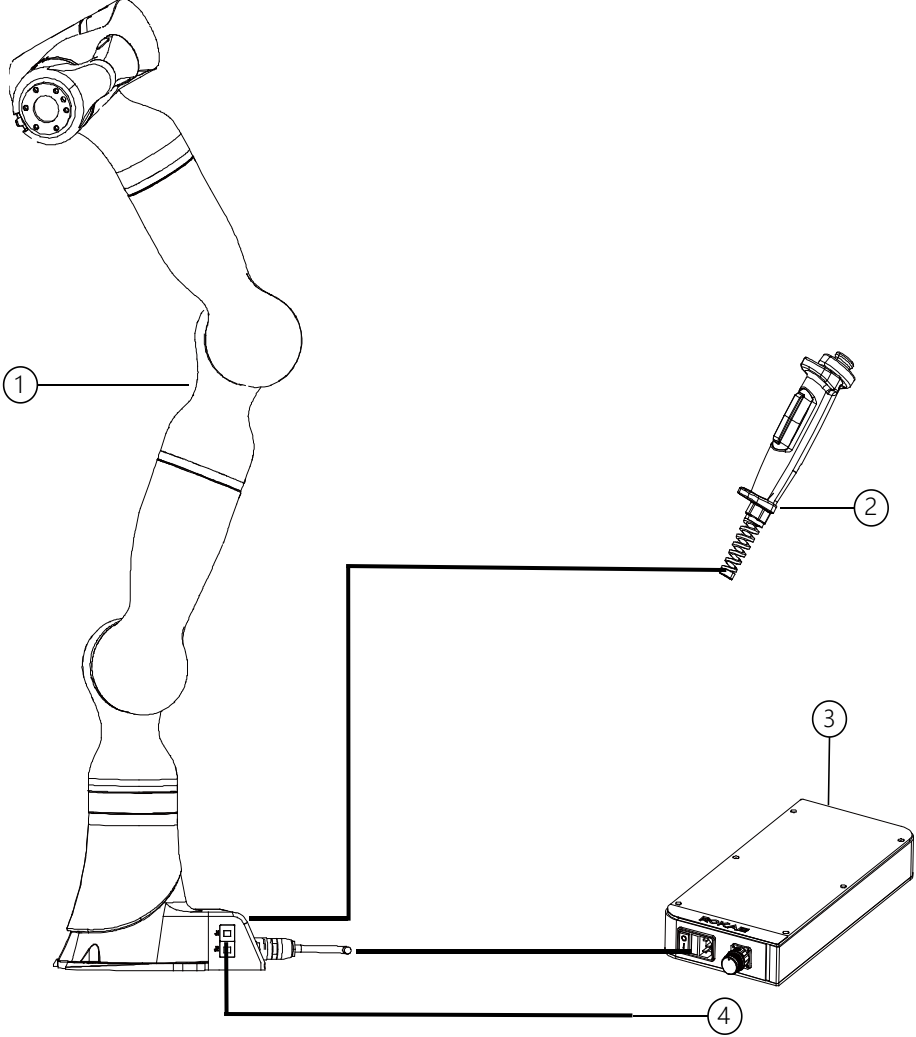


图 3-1 机器人系统

标号	名称
1	xMate ER3 Pro机器人系统
2	手持急停使能手柄
3	电源适配器及线缆
4	其他接口附件

3.2.3 转动方向与坐标系定义

柔性协作机器人 xMate ER3 Pro 本体共 7 个自由度，也称作 7 个关节（见图 3-2 机器人各轴运动方向与坐标系定义），其各个轴转动方向与坐标系的定义如下：

基座坐标系：底座出线方向为-X 方向，垂直安装面向上为+Z，右手定则确定 Y 轴方向。

法兰坐标系：机器人零位姿态下，垂直法兰向外为+Z，Pilot 中线方向为+Y，右手定则确定 X 轴。

旋转轴方向定义：各轴处于机械零位时，A1/A3/A5/A7 旋转正向与基座坐标系+Z 方向一致，A2/A4/A6 旋转正向与基座坐标系+Y 方向一致。

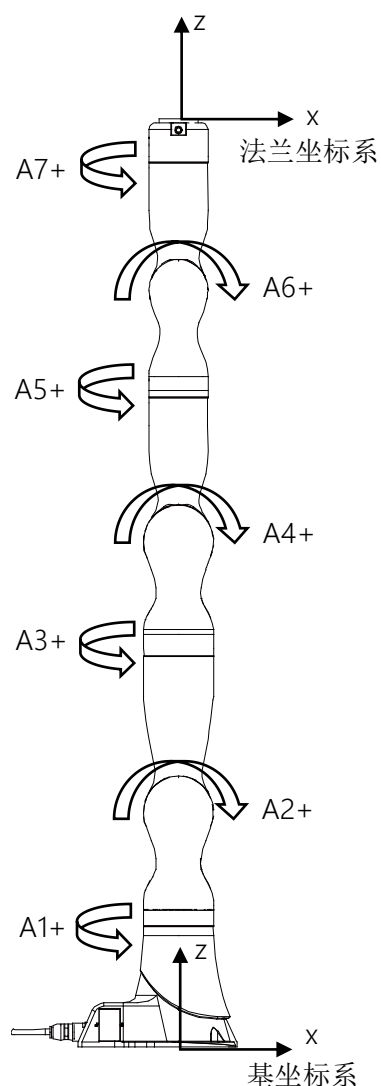


图 3-2 机器人各轴运动方向与坐标系定义

3.3 标志和标签

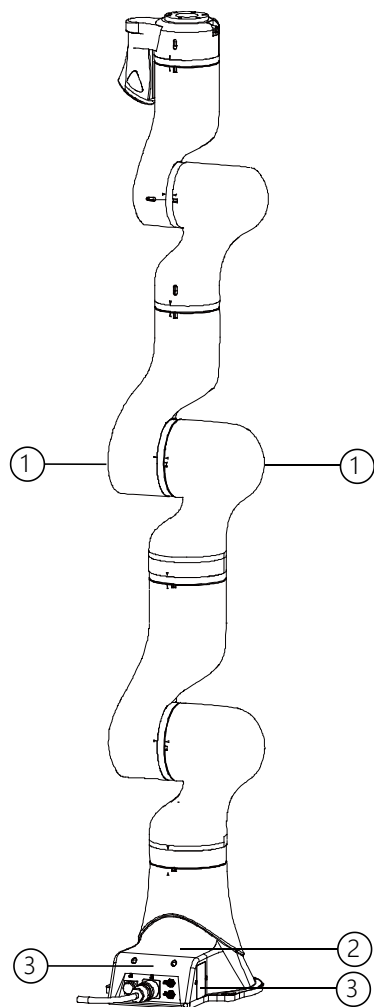


图 3-3 标志与标签

位置	标签类型	备注
1	本体 LOGO	
2	产品铭牌	标明产品型号等产品信息
3	小心触电标识	请勿在带电状态下触碰机器人内电气部件，否则可能导致触电事故

4 技术规格

4.1 简介

本节主要介绍xMate ER3 Pro柔性协作机器人产品的各项性能参数

4.2 技术参数

产品名称		xMate ER3 Pro
轴数		7
工作半径		1010mm
P 点可达半径		760mm
重复定位精度		±0.03mm
最大总负载能力		3kg
运动范围	轴 1	±170°
	轴 2	±120°
	轴 3	±170°
	轴 4	±120°
	轴 5	±170°
	轴 6	±120°
	轴 7	±360°
最大速度	轴 1	180°/s
	轴 2	150°/s
	轴 3	180°/s
	轴 4	180°/s
	轴 5	225°/s
	轴 6	225°/s
	轴 7	225°/s
工作温度		0℃~+45℃
储藏温度		-10℃~+55℃
防护等级		IP54
安装方式		任意角度安装
本体重量		约 22kg
噪音水平		≤70dB(A)

4.3 工作空间

xMate ER3 Pro工作空间图如下图所示：

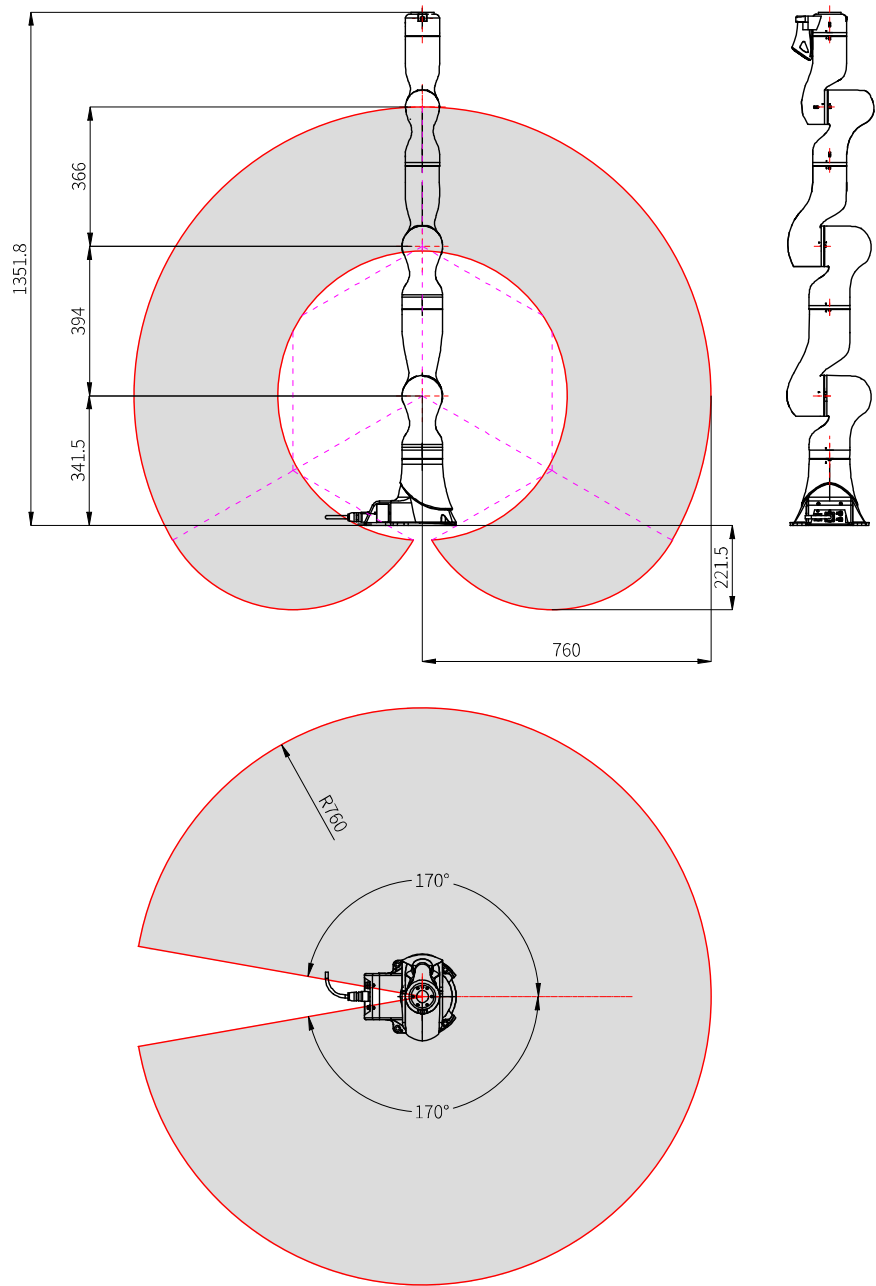


图 4-1 xMate ER3 Pro工作空间图

4.4 手腕最大允许负载曲线

xMate ER3 Pro最大允许负载与负载重心偏移相关，其定义为从工具法兰面中心到负载重心的距离。下图为负载与重心偏移的关系图：

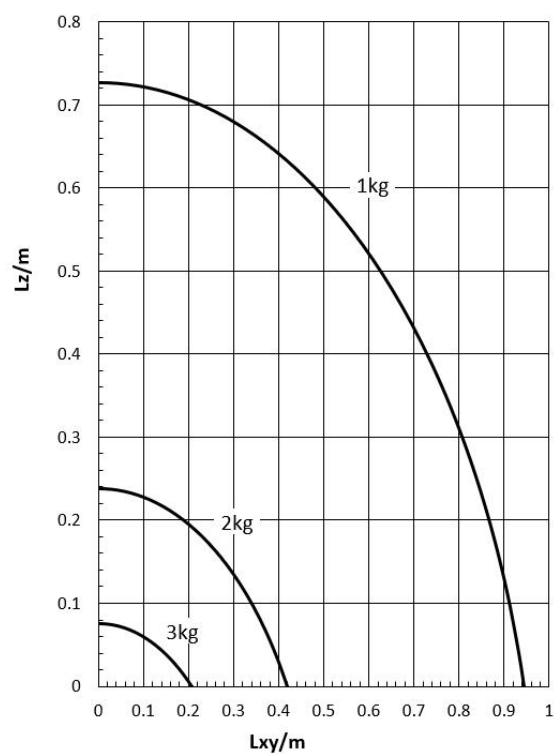


图 4-2 手腕最大允许负载与重心偏移关系图

**警告**

计算负载重量时，必须将执行器重量一并计入并确保符合机器人负载规格。确保系统决不超过最大容许负载。

5 开箱与安装

5.1 简介

本章主要介绍收到xMate ER3 Pro柔性协作机器人后的开箱与安装所需注意的相关信息。

5.2 安装流程表


安装流程表用于检查机器人安装进度，每个操作步骤结束后，在“完成”一览中打勾

步骤	操作	完成
1.机器人安装前的准备		
①	安装人员	
②	安装环境	
③	安装地基	
④	支撑柱	
2.机器人安装尺寸		
3.开箱与搬运		
①	开箱	
②	核对装箱清单	
③	搬运	
4.安装机器人本体		
①	将机器人固定在安装位	
5.线缆连接		
①	连接机器人本体与控制柜之间的供电及信号线缆	
6.用户配线/管		
①	连接 I/O 信号线缆和气管	

5.3 环境条件

机器人适用于普通工业环境，其使用环境需符合下述条件：

项目	条件
温度	0℃~+40℃
相对湿度	20%~80%，不得结露
脉冲群干扰（EFT）	±2kV 以下
静电干扰（ESD）	±8kV 以下
环境	室内安装。 避免阳光照射。 远离灰尘、油烟、盐分、铁屑等。 远离易燃性、腐蚀性液体与气体。 不得与水接触。 不传递冲击与振动。 远离电气干扰源。



警告

机器人不得置于或在爆炸性环境中使用！



提示

在环境温度较低（< 10℃）的情况下，减速器（或齿轮箱）内的润滑脂（或润滑油）粘度较高，可能会导致机器人停机或低效运行，此时推荐机器人与其他配套设备一起进行预热。

机器人的储存环境应符合下述条件：

项目	条件
温度	-10°~+55°
相对湿度	20%~80%，不得结露

5.4 开箱与硬件安装

5.4.1 开箱

开箱准备

请按照表 准备开箱所需工具

序号	工具	数量
1	美工刀/剪刀	1
2	M8 内六角扳手	1
3	防护手套	1

开箱步骤：

① 步骤 1：拆外包装纸箱

戴上防护手套，用剪刀或美工刀划开包装密封，打开包装后可看到纸箱内部有：

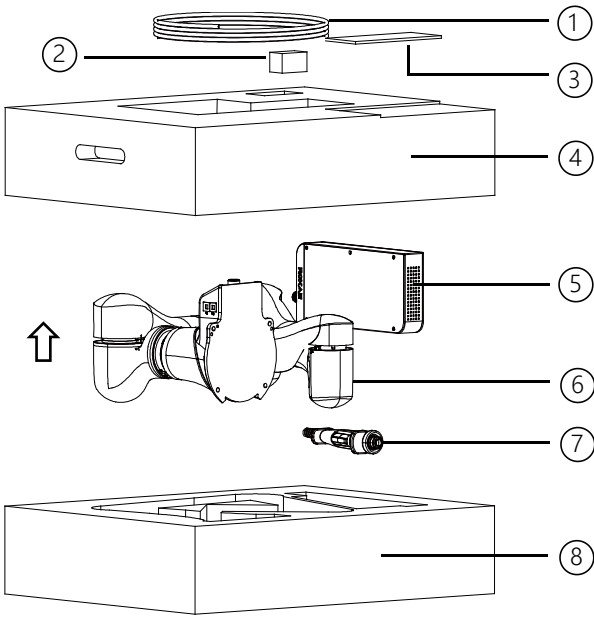



图 5-1 拆箱示意图

标号	内容	型号	数量	备注
1	电源线	AC 220V 2M	1	
	电源线	DC 48V 5M	1	
	伺服调试线	LS18E2-A01-225	1	
2	U 盘	Rokae 32G	1	
	机械零位标定块	xMate ER3 Pro标定块	1	

	接口转接头	9992250008 M8	1	配套法兰末端接口
3	xMate ER3 Pro硬件安装手册		1	电子文档储存在 U 盘中
	xCore 控制系统用户手册			
	RCI 用户使用手册		1	
4	上内衬	TY0180101	1	
5	电源适配器	xMate-PW1000-01	1	
6	xMate ER3 Pro		1	
7	手持急停使能手柄		1	配有线缆
8	下内衬	TY0180102	1	

② 步骤二：依序取出箱内各部件

上述零散配件需注意保管，电源适配器以及线缆等配件注意轻拿轻放

**警告**

机器人本体安装到指定位置之前的所有拆箱后运输过程，务必连带上下内衬一同运输，运输过程中注意保持平衡，防止倾翻，只有在机器人本体安装固定前才可将机器人本体从内衬中取出。

5.4.2 机器人运输角度与搬运部位

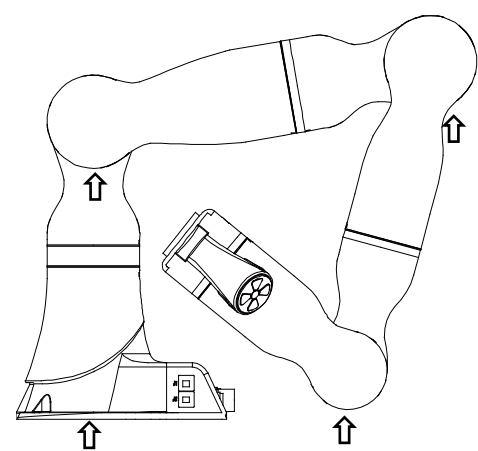



图 5-2 包装运输姿态与建议受力位置

A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7
25°	-80°	0°	-115°	0°	-114°	0°

**警告**

图示箭头位置和方向表示，机器人在包装运输姿态下的建议受力位置和方向，强烈不建议您通过其他位置受力来运输机器人，不当的操作和着力点可能会对机器人造成损伤！

5.4.3 安装前检查

安装操作机器人的安装人员必须具备机械和电子设备安装/维护/维修工作所需的知识，并遵守所有国家和地区相关规范。

检查安装的先决条件：

序号	操作
1	目测检查机器人，确保未受损伤
2	确保机器人预期的操作环境符合此节描述：
3	确保安装现场符合条件：
4	如果未直接安装，则确保现场符合环境要求：
5	满足以上先决条件后，即可按照下一节内容安装机器人：

5.5 现场安装

5.5.1 搬运

5.5.1.1 倾斜风险

若机器人处于未固定在任何基座上并保持静止的状态，务必保证机器人处于包装下内衬之中，此时机器人不稳定，任何移动操作均可能造成机器人重心偏移或倾斜，甚至导致倾翻。

5.5.1.2 搬运尺寸

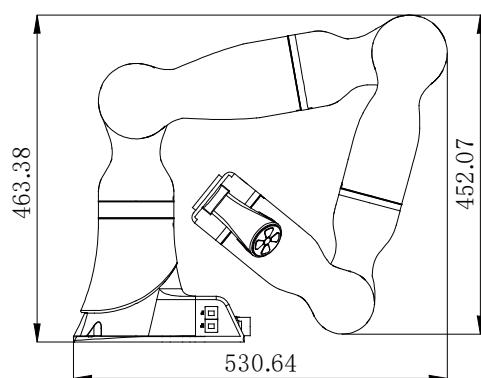


图 5-3 机器人搬运参考尺寸

5.5.2 安装机器人

5.5.2.1 固定所需零件

零部件名称	详述	支架安装	地基安装
内六角圆柱头螺钉	4-M8x20 (12.9 级)	✓	✓
膨胀螺栓 (化学螺栓)	4-M16 (不低于 4.8 级)		✓
机器人固定板	厚度至少 15mm		✓
安装支座	安装板厚度至少 15mm	✓	

注释：

1. 机器人固定板及安装支座与操作机、混凝土之间不得有绝缘层物质；
2. “✓” 表示此种安装方式需要；
3. 安装支架的固定强度不得低于地基安装时机器人固定板与地基的固定强度。

5.5.2.2 支架安装

固定方式及具体参数如下：为保证定位准确可在预留的圆柱销孔中使用销钉定位，随后用 4 个 M8 X20 的内六角圆柱头螺栓 (强度等级 12.9 级) 将机器人底座固定在支架上，M8 螺栓必须

使用 35Nm 的扭矩拧紧。



警告

注意底座的安装螺栓必须使用 20Nm 的扭矩拧紧，确保机器人正确且安全地安装到位，任何不稳定的安装都可能导致事故发生！

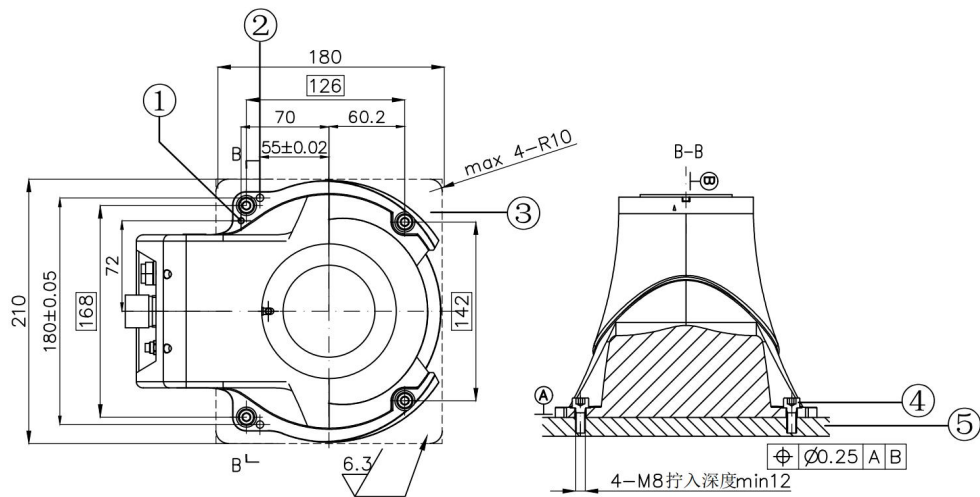


图 5-4 支架固定方式参考

标号	注释
1	接地螺孔 M5
2	圆柱销孔Φ6H7
3	支承面
4	内六角圆柱头螺钉 4-M8X20
5	钢结构支座

5.5.2.3 地基安装

固定方式及具体参数如下：将机器人固定板紧贴安装平面上，用 4 个 M16 膨胀螺栓或化学螺栓（强度等级不低于 4.8）将其固定。后用 4 个 M8X20 内六角圆柱头螺栓（强度等级 12.9 级），将机器人底座固定到固定板上，M8 螺栓必须使用 35Nm 的扭矩拧紧，固定板表面应当满足相应的粗糙度及形位公差要求。



警告

采用此种固定方式的前提是地基有足够的负载能力，并且表面平整光滑，混凝土地基必须能够可靠地支撑出现的力，必须保证最小尺寸。

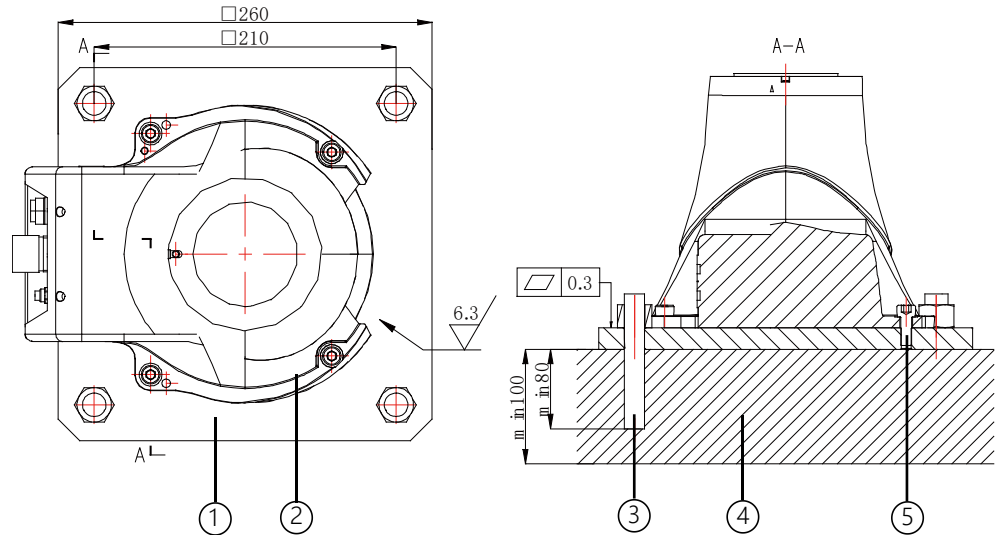


图 5-5 地基固定方式参考

标号	注释
1	机器人固定板
2	xMate ER3 Pro底座
3	膨胀螺栓（化学螺栓） 4-M16
4	混凝土地基
5	内六角圆柱头螺钉 4-M8X20

5.5.2.4 机器人支反力

机器人安装后，其安装底座会由于机器人的静力以及动力产生较大支反力，如下图，机器人底座必须能够承受该支反力。

名称	解释
F_{xy}/N	XY 平面中任意方向上的力
F_z/N	Z 平面中的力
M_{xy}/Nm	XY 平面中任意方向上的弯曲转矩
M_z/Nm	Z 平面上的弯曲转矩

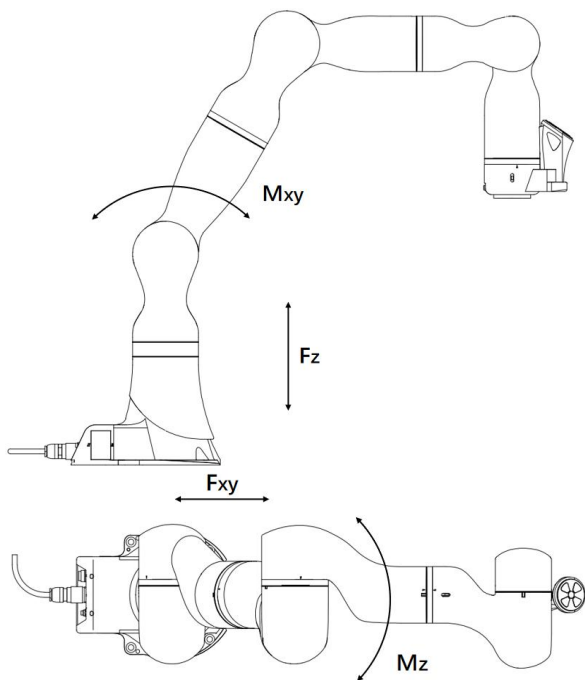



图 5-6 机器人支反力图

力	ER3P 最大值
F_{xy}/N	480
F_z/N	725
M_{xy}/Nm	244
M_z/Nm	182



提示

以上力和转矩的数据是机器人在运动过程中出现的极限数值，很少情况会出现，且以上数值无法同时达到最大。

5.5.3 法兰

为了准确的定位工具，请使用预留的Φ6 销孔准确定位。机器人末端法兰有 6 个 M6 螺纹孔，可用于将工具连接到机器人法兰上，M6 螺栓必须使用 15Nm 的扭矩拧紧，具体尺寸参考下图所示：

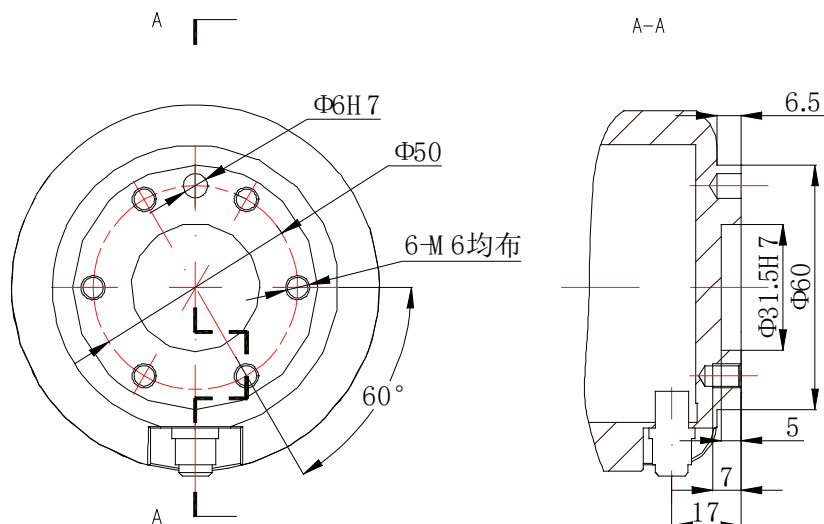


图 5-7 工具法兰安装

**警告**

- 确保工具正确且安全的安装到位, 注意安装工具的活动范围是否影响到机器人的活动空间;
- 确保安装工具的 M6 螺钉不要超过图示的螺纹长度, 避免造成不可修复的损伤;
- 确保工具安全, 不存在有零件的意外脱落造成危险。

5.5.4 电源适配器

电源适配器不具备额外的机械安装接口, 可根据现场实际需求安放在指定位置, 该位置应当满足如下条件:

1. 通风散热条件良好;
2. xMate ER3 Pro机器人本体活动范围之外;
3. 电源开关易于让操作人员触碰。

6 电气连接

6.1 电气布局

本章描述了xMate ER3 Pro本体及相关设备的所有电气接口及操作接口使用。xMate ER3 Pro 机器人配置了手持式急停使能手柄，集成商可选配电源适配器用于机器人本体供电，配置的网络接口可将机器人连接到外部网络，或通过装有xMate ER3 Pro运行软件的 PAD 设备、PC 设备等对机器人本体进行相应控制和调试。

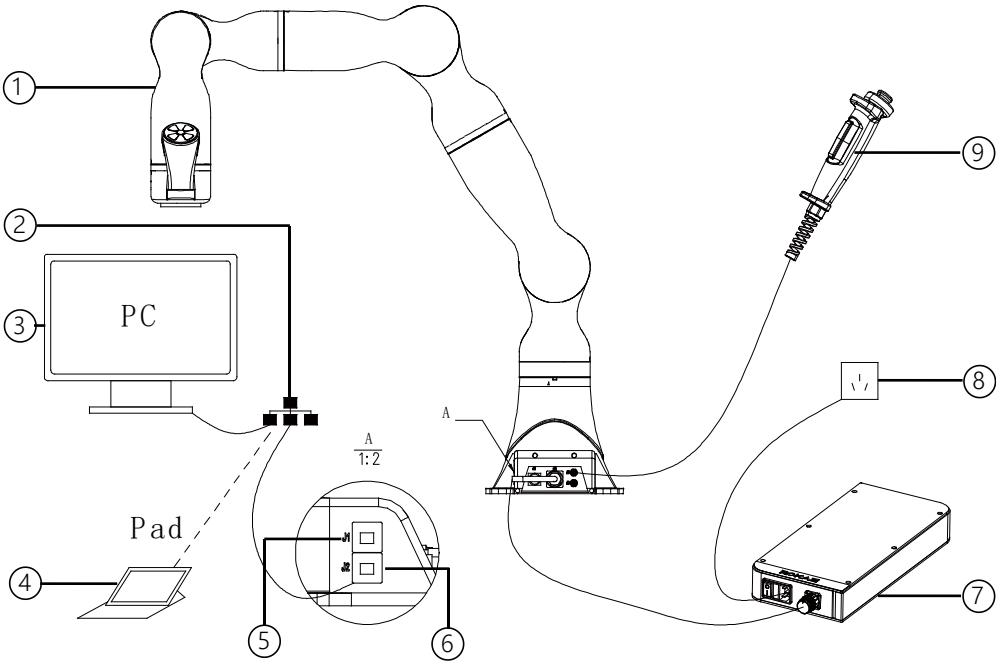



图 6-1 电气布局图

标号	名称
1	xMate ER3 Pro本体
2	外部网络
3	PC 设备
4	Pad 设备
5	J1 网口（可配置 IP）
6	J2 网口（固定 IP）
7	电源适配器
8	外部电源
9	手持急停使能手柄

**提示**

对xMate ER3 Pro机器人的控制和使用请参考机器人运行软件使用手册。

6.2 本体底座

本节介绍机器人底座本体包含的所有进出线接口。

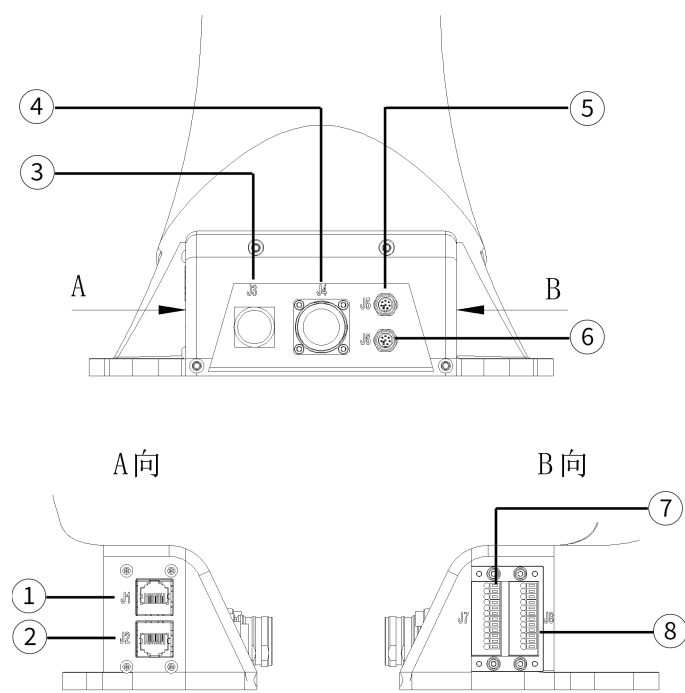


图 6-2 底座接口分布图

标号	含义	底座本体标记
1	扩展 EtherNet 口 (可配置 IP)	J1
2	扩展 EtherNet 口 (固定 IP)	J2
3	上电按钮及指示接口	J3
4	本体供电接口	J4
5	手持急停使能手柄接口	J5
6	EtherCAT 伺服驱动调试口	J6
7	安全 DIO	J7
8	通用 DIO	J8

6.2.1 本体电源输入

本体电源输入接口为 M23 型专用插座（针式），配合带专用插头（孔式）的xMate ER3 Pro 电源线可给机器人本体供电。本体输入电源的电气规格如下表所示：

参数	最小值	典型值	最大值	单位
输入电压范围	43.2	48	52.8	VDC
功率范围	200	——	1000	W

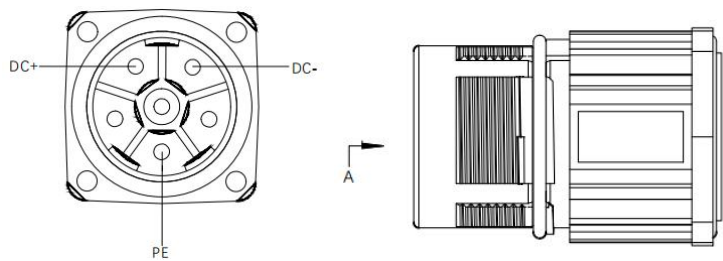


图 6-3 供电接口（A 为视角方向）

6.2.2 本体上电

本体上电按钮为本体电源输入的主控制开关，内部 24VDC 供电，为平头带灯自锁按钮，控制机器人通电的同时显示本体的通电状态。

按钮状态（自锁定）	指示灯状态	本体状态
未按下	灭	未通电
按下	红色常亮	已通电

6.2.3 手持急停使能手柄接口

本体底座上 J5 位置的 M9 圆形连接器为机器人的手持急停使能手柄接口，适配专用手持急停使能模块，可实现对机器人的急停、使能等功能。

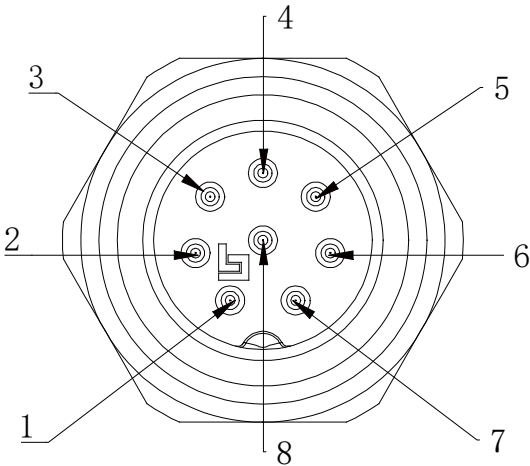


图 6-4 手持急停使能手柄接口

6.2.4 通用 DIO

xMate ER3 Pro有四路数字输入和四路数字输出通道，集中在端子式连接器 J8 上，用户使用 DIO 功能时须使用带有 E0308 针式冷压接线端子的连接线连接相应通道。

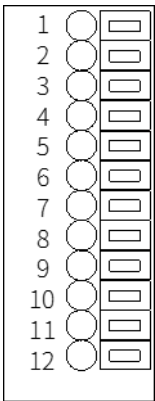


图 6-5 通用 DIO 接口 J8

点位	定义
1	24V+
2	GND
3	DI_COM

4	DO_COM
5	DI_00
6	DO_00
7	DI_01
8	DO_01
9	DI_02
10	DO_02
11	DI_03
12	DO_03

6.2.4.1 通用 DI

数字输入可配置成 PNP 和 NPN 两种模式，两种模式支持用户端输入的电气规格：

	最小值	典型值	最大值	单位
输入电压范围	21	24	27	V

配置为不同模式的电气原理分别如下：

- PNP 输入

当配置为 PNP 输入时，具体使用方法可参考图 6-6 PNP 输入接线示意图。

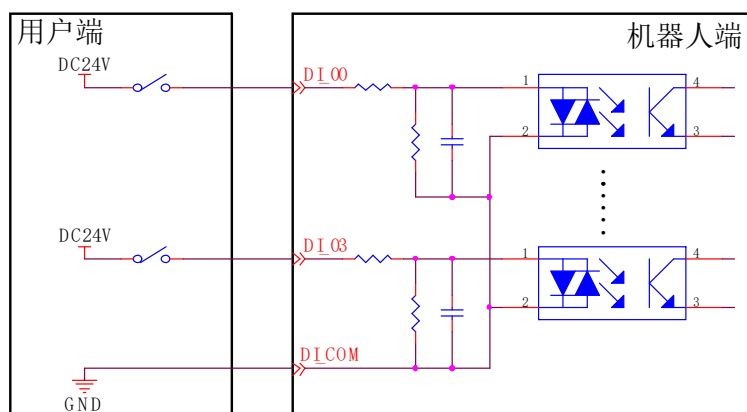


图 6-6 PNP 输入接线示意图

- NPN 输入

当配置为 NPN 输入时，具体使用方法可参考图 6-7 NPN 输入接线示意图。

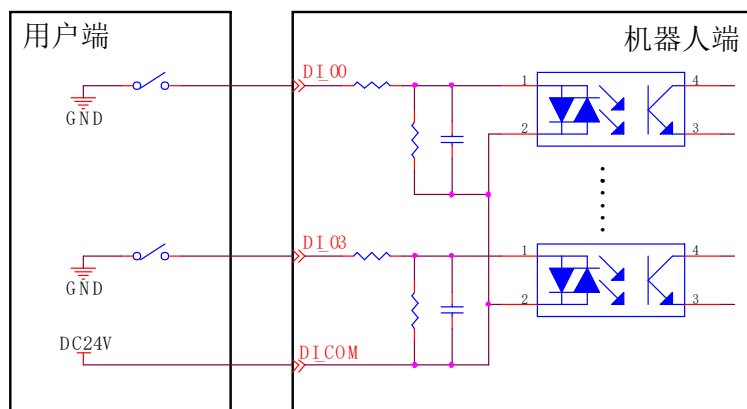


图 6-7 NPN 输入接线示意图

6.2.4.2 通用 DO

数字输出可配置成 PNP 和 NPN 两种模式，两种模式支持用户端输出的电气参数规格：

	最小值	典型值	最大值	单位
负载电压范围	0	24	30	V
持续负载电流	0	——	300	mA

若持续负载电流超过最大值，需要使用额外的继电器进行驱动。

配置为不同模式的使用电气原理分别如下：

● NPN 输出

将 DO_COM 端连接到电源的负端，如图 6-8 NPN 输出接线示意图所示。

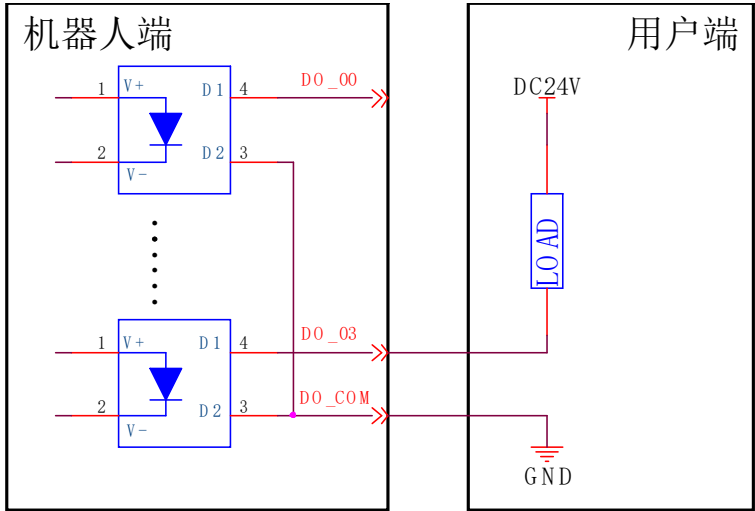


图 6-8 NPN 输出接线示意图

● PNP 输出

将 DO_COM 端连接到电源的正端，如图 6-9 PNP 输出接线示意图所示

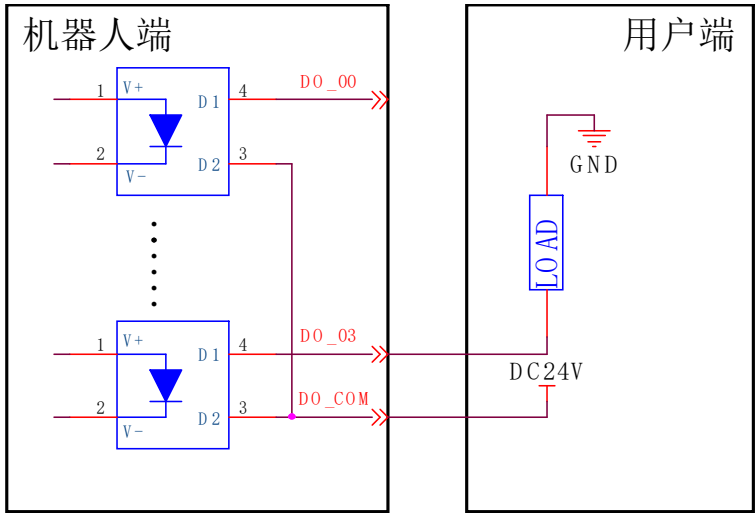


图 6-9 PNP 输出接线示意图

6.2.5 安全 DIO

xMate ER3 Pro 具备外部急停、防护停止（如安全门）专用安全输入和安全状态反馈专用安全输出，各通道集中在端子式连接器 J7 上，使用该安全 DIO 功能时须使用带有 E0308 针式冷压接线端子的连接线连接相应通道。

所有安全 DIO 都是成对冗余的，使用时必须保证是两个独立的分支，单个分支的故障不会导致相应安全功能失效。

点位	定义
1	VCC24
2	SGATE1
3	VCC24
4	SGATE2
5	VCC24
6	EXSTOP1
7	VCC24
8	EXSTOP2
9	STOP_STATE_00_A
10	STOP_STATE_00_B
11	STOP_STATE_01_A
12	STOP_STATE_01_B

6.2.5.1 安全 DI

安全 DI 接口的电气原理规格如下图。

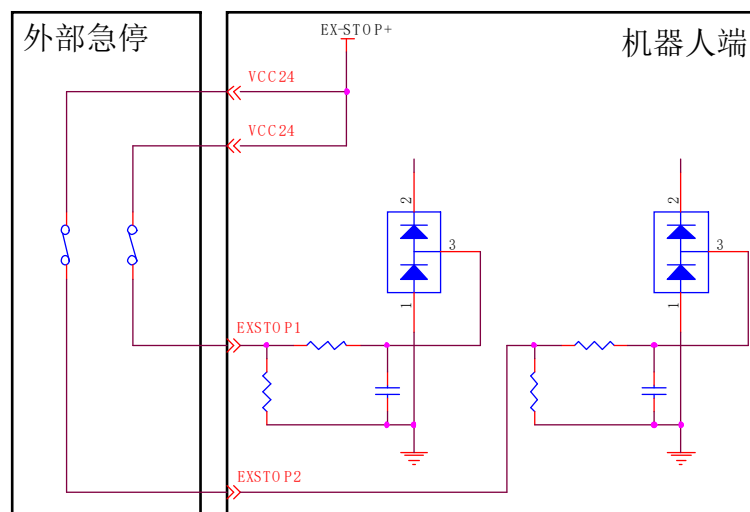


图 6-10 外部急停接口示意图

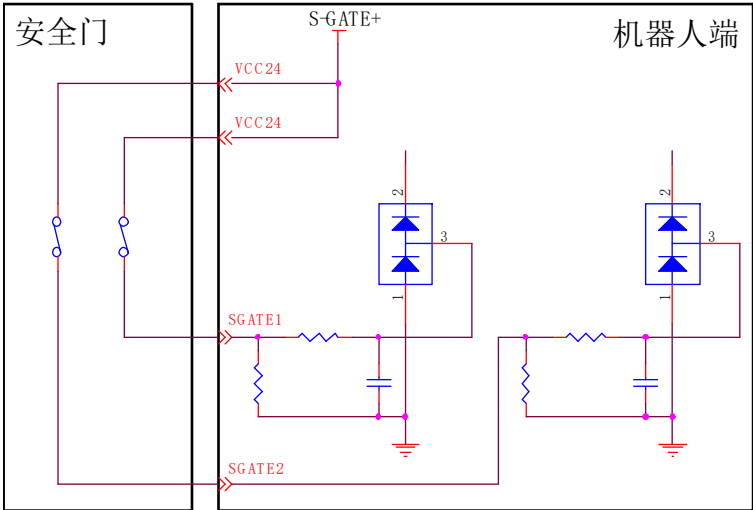



图 6-11 安全门接口示意图

	外部急停	防护停止（安全门）
作用	仅用于紧急停止设备	用于其他安全型保护设备
机器人状态	停止运动	停止运动
程序执行	暂停	暂停
驱动电源	关 ^[1]	关 ^[1]
使用频率	不常使用	不常使用

 **警告**

- 安全型 I/O 均具备冗余性（两个独立通道）。保持两个通道独立，可确保在发生单一通道故障时不会丧失安全功能。
- 在将机器人投入使用前，务必检验安全功能。必须定期测试安全功能。
- 机器人的安装需遵循这些规格。如果不遵循这些规格，有可能会造成严重的人员伤亡，因为安全功能有可能失效！

 **注意**

[1] XME3P-R760-B0S0 机型不具备该功能。

默认安全配置：

每一个安全功能输入或状态输出信号均为双路控制，外部急停及防护停止出厂时已短接，可在没有任何附加安全设备的条件下操作。

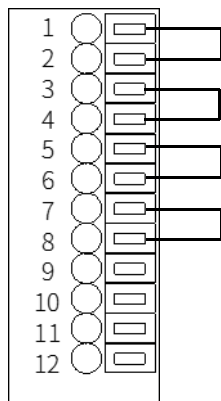


图 6-12 短接线示意图

机器人出厂为默认的安全配置，集成商可根据现场安全设备的配备情况将安全设备接入到安全DIO中。

6.2.5.2 安全 DO

安全 DO 共有 2 路，对外部急停设备安全输入的状态反馈，发生外部急停或手持急停时，两路反馈各自的 A、B 之间反馈为断开状态，未发生外部急停时为短路状态。

6.2.6 扩展 EtherNet 口

J1 及 J2 为标准 RJ45 接口，使用标准网线对接，支持 EtherNet、Modbus TCP/IP 通讯协议，最大通讯速率 100Mbps，可将 xMate ER3 Pro 机器人连接到安装有 xMate 操作软件的网络设备中。

6.2.7 EtherCAT 伺服驱动调试口

M9 圆形连接器，使用专用扩展线，可对伺服参数设置及状态监控，此功能仅对内部专业调试人员开放。

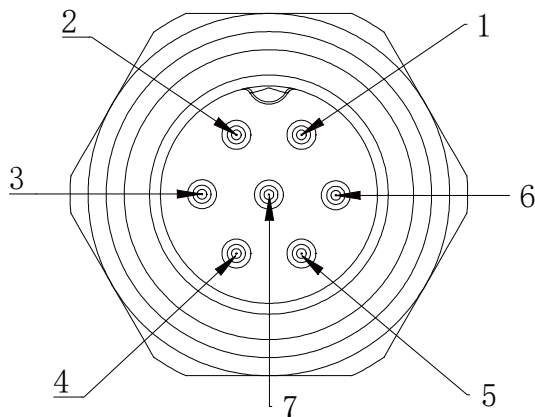


图 6-13 EtherCAT 调试口定义

6.2.8 把手功能按键

机器人末端在把手上配备了用于在安全条件下的连续路径记录、示教、拖动等功能的功能按键如下图表所示。

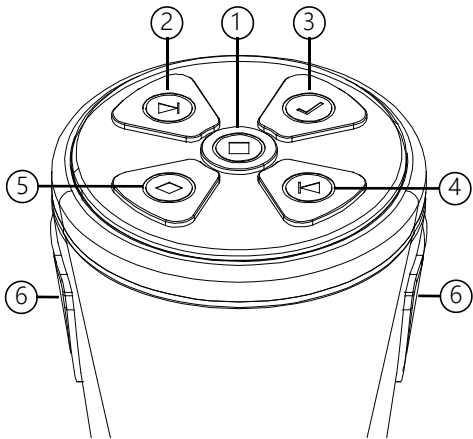


图 6-14 末端把手按键定义

标号	定义
1	以当前位姿更新示教点，开始/停止轨迹录制
2	列表中光标向后方向
3	增加列表中点位/轨迹，弹窗提示确认
4	列表中光标向前方向
5	删除列表中点位/轨迹，弹窗提示取消
6	手动模式下，两个使能按键同时按下开启拖动功能

6.2.9 工具接口

在机器人的末端把手的工具法兰旁边配备了 1 个圆形连接器，可对安装于机器人末端的执行器提供相应电气扩展接口，该接口可选配xMate ER3 Pro机器人专用手抓作为末端执行器。

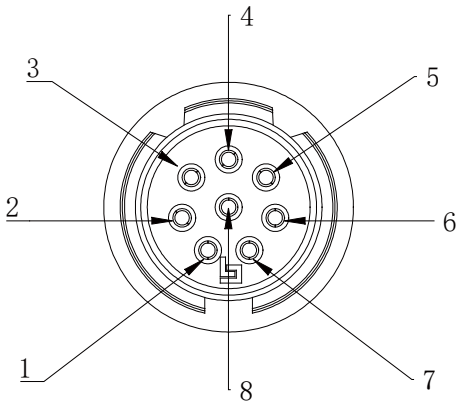


图 6-15 末端圆形连接器接口定义

标号	定义
1	VCC24V
2	GND
3	DI_0
4	DI_1
5	DO_0
6	DO_1

7	RS485A
8	RS485B

6.2.9.1 专用工具 IO

xMate ER3 Pro机器人可选配专用的手抓作为末端执行器，手抓的电气和专用通信接口直接集成在此连接器中。

6.2.9.2 一般工具 IO

集成商在此机器人工具上使用夹持器和传感器时，连接器可提供电源和控制信号。

工具电源的电气规格如下：

	最小值	典型值	最大值	单位
工具电源电压	23.5	24	24.8	V
工具电源电流	——	1	2	A



注意

1. 工具电源的电流最大值 2A 为峰值，峰值时间不超过 1s

工具数字输出：

机器人提供 2 路工具数字输出，数字输出内置 24V 电源，在激活状态下为用户端提供 24V 电源，用户端工具数字输出接入负载的电气原理示意图如下所示：

	默认状态	激活状态	最大值	单位
输出电平	低	高	——	——
持续负载电流	0	——	100	mA

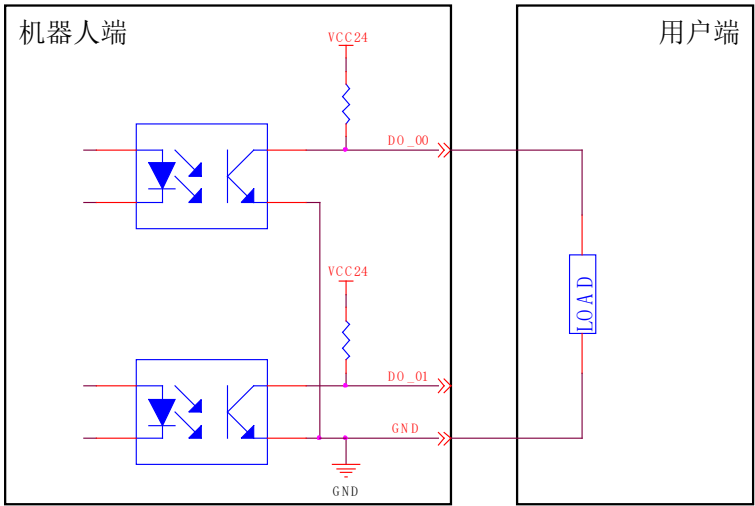


图 6-16 末端输出接口示意图



注意

工具中的数字输出端没有电流限制保护。若超过所规定的数值，可能会导致永久性损坏。

工具数字输入：

机器人提供 2 路工具数字输入，数字输入配有 24V 上拉实现，悬浮状态下数字输入的读数始终为高，用户端连接 2 个简单按钮的电气原理如下图所示：

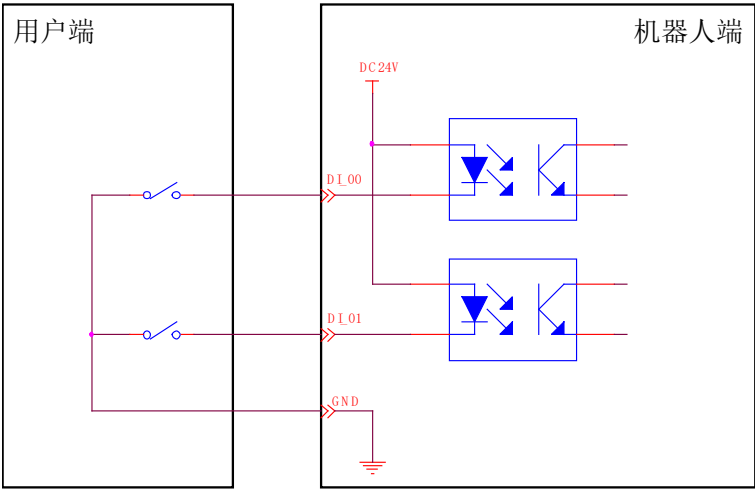


图 6-17 末端输入接口示意图

6.3 电源适配器

电源适配器是xMate ER3 Pro机器人的选配部件，可将市电转换为xMate ER3 Pro本体可用直流电源，同时具备电源指示功能。

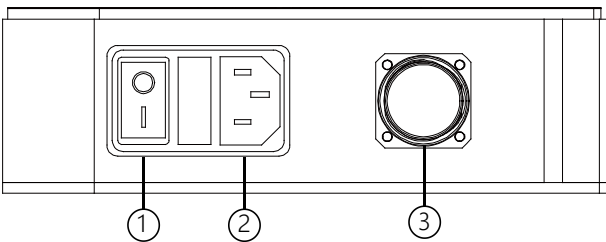


图 6-18 电源适配器接口

标号	含义
1	上电按钮及指示
2	电源输入
3	电源输出

6.3.1 电源适配器上电

电源适配器的上电按钮为船型自锁转换开关，作为电源输入的主控制开关，同时显示适配器通电状态。

转换开关（自锁定）	适配器状态
O	未通电
I	已通电

6.3.2 电源输入

电源适配器的输入电源接口为 IEC 标准 C14 插座（针式），适配 IEC 标准 C13 插头（孔式），

外部市电保险丝额定电流为 10A, 输入电源的状态指示如下

转换开关（自锁定）	适配器状态
O	未通电
I	已通电

输入电源的电气规格如下

ROKAE 电源适配器		
输出	直流电压	48V
	额定电流	21A
	纹波与噪声	150mVp-p
输入	电压范围	90~264VAC
	频率范围	47~63Hz
	效率	90%
环境	工作温度	-20~+60℃
	工作湿度	20~90%RH 无冷凝
	存储温度, 湿度	-40~+85℃, 10~95%RH
	耐震动	10~500Hz, 2G 10min/周期, XYZ 轴各 60min

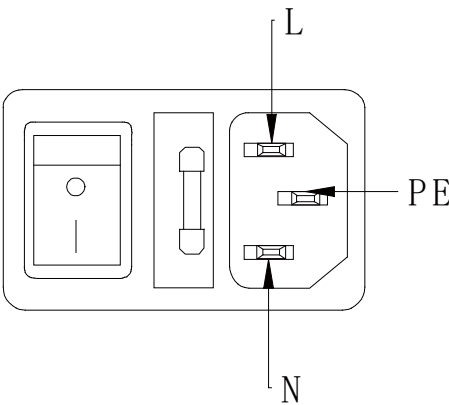


图 6-19 电源输入接口示意图

6.3.3 电源输出

适配器的电源输出接口为 M23 专用插座（孔式），输出为xMate ER3 Pro机器人可用的直流电压源(48VDC)，配备专用带有插头（针式）插头的xMate ER3 Pro本体电源供电线，可为机器人供电。

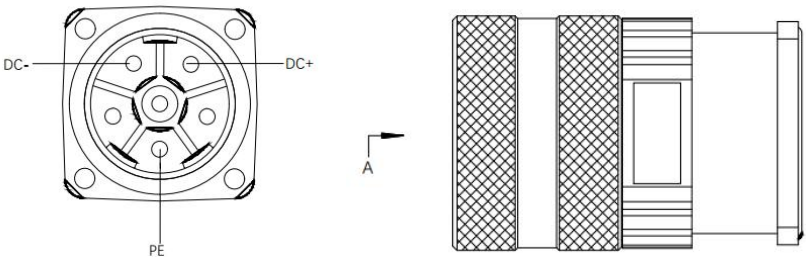


图 6-20 电源输出接口示意图（A 为视角方向）

7 维护

7.1 简介

维护之前请仔细阅读“关于维护时的安全”小节、本手册以及相关手册，在充分理解安全维护方法的基础上进行维护工作。

7.2 关于维护时的安全



警告

- 请严格遵守维护步骤，勿随意拆卸机器人零部件。
- 维护作业需由指定的专业人员完成。
- 如果未接受过培训，请在电源接通时远离机器人。另外，请勿进入到动作区域内。即使看到机器人似乎停止了动作，但处于通电状态的机器人可能还会意外进行动作，并可能造成严重的安全问题。
- 请务必在安全围栏之外确认更换部件后的机器人动作。否则，动作确认之前的机器人可能会进行意想不到的动作，并可能造成严重的安全问题。
- 进入正规运转之前，请确认紧急停止开关与安全护板开关动作状态正常。如果在开关不能正常动作的状态下进行运转，发生紧急状况时则无法发挥安全功能，可能会导致重伤或重大损害，非常危险。

7.3 维护概要

7.3.1 电池的更换

7.3.1.1 处理电池存在的安全风险

在正常使用条件下，只要电池保持完整性，电池中的电机材料及液态电解质就不会暴露在外界中。只有在电池受到机械、热、电等方面的不当使用时，才可能存在安全风险。这些情况将导致安全阀被激活和/或电池容器破裂。根据环境，接下来可能发生电解液泄漏、电极材料与潮气/水分发生反应或者电池泄漏/爆炸/火灾。



警告

- 请充分注意电池的使用，如果采取下述错误使用方法，则可能导致发热、漏液、爆炸或引起火灾等，非常危险。
- 错误使用方法有：尝试充电、加压变形、拆解、短路、电池连接不当、加热、置于火中、焊接电池端子、强制放电。
- 电池废弃的处理请参照各国各地区相关法律法规进行，或咨询专业处理公司。注意即使是用过的电池如果接触其他金属或者电池端子，则有可能造成短路，从而导致危险。

7.3.1.2 更换电池

状态确认：

只有在机器人静止且电源适配器关机状态下才可操作更换电池，请务必在操作前检查此状态。



机器人在任何状态下完成电池更换作业后，均需要进行机械零点标定，具体参考机械标定节。

工具准备：

请按照下表准备更换工具：

序号	工具	数量
1	偏口钳	1
2	内六角螺栓扳手（2.5）	1
3	尼龙扎带（3X100mm）	2

更换步骤：

- ① 步骤 1：将机器人底座上所有电气接口连接的外部线缆拆卸；



警告

在更换电池作业期间，请采取必要的预防措施以避免他人重新接通系统能源。

- ② 步骤 2：使用内六角螺栓扳手（2.5）拆卸底座后盖的 4 个 M3 螺钉，将底座后盖与底座本体缓慢分离。

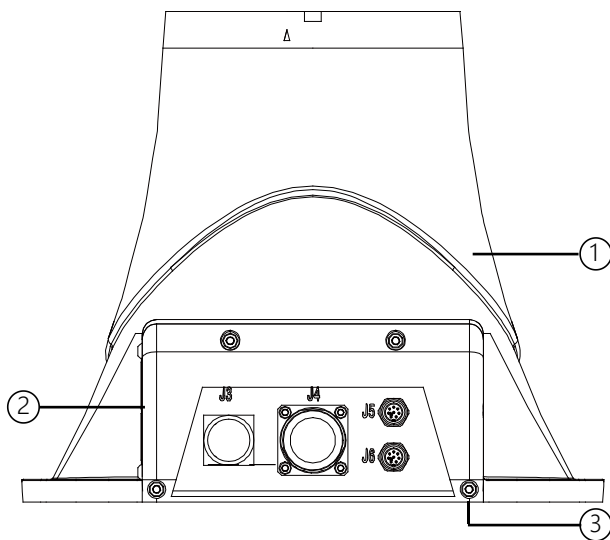


图 7-1 步骤 2

- ③ 步骤 3：底座后盖分离至如图 7-2 步骤 3 时，可观察到电池由两根尼龙扎带捆绑在电池固定架上，用偏口钳剪断尼龙扎带，将电池转接线上的接插件拔开后即可将电池拿出。

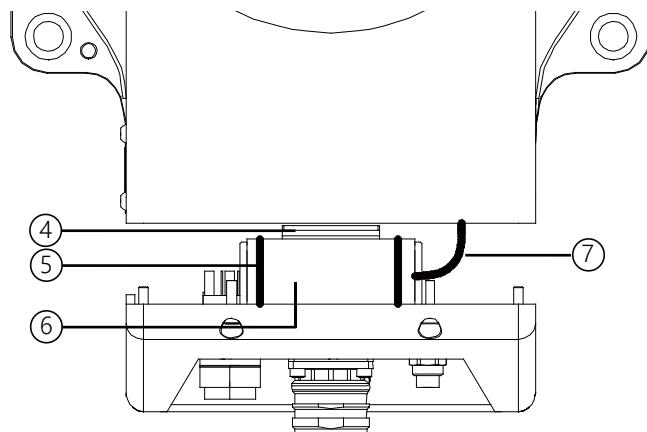



图 7-2 步骤 3

- ④ 步骤 4：参考上述步骤的反向过程将新准备好的电池装入底座中，即完成电池的硬件更换。

底座后盖的 4 个 M3 螺钉需用 2Nm 的扭矩拧紧。



警告

更换电池后务必对机器人本体状态检查，确保机器人状态完整才可上电作业；

标号	注释
1	底座本体
2	底座后盖
3	内六角圆柱头螺钉 M3x10
4	电池固定架
5	尼龙扎带
6	电池
7	电池转接线


7.4 维护计划

为了使机器人能够长期保持高效的性能，必须定期进行维护。检修人员须编制检修计划并严格执行。

7.5 检查

序号	检查项	检查位置	检查间隔				
			日常	1 个月	3 个月	6 个月	12 个月
1	检查外观损伤。	机器人外观					
		外部电缆					
2	检查电源适配器以及机器人底座接插件是否松动	机器人底座					
		电源适配器					
3	编码器电池	软件启动时出现电池电量低的错误警告情况下，或每 1.5 年更换一次电池。					

7.6 清洁



警告

不当使用液体清洁剂和设备电源未正确断开均可能会导致电击事故，危及生命！



警告

只有完全断电后才可清洁作业；
切勿使用液体清洁剂清洁设备；
请勿在设备潮湿状态下接通设备电源。

清洁机器人设备需要考虑以下几点：

只有经过指导的用户才能进行清洁；
勿使用任何化学试剂清洁机器人，所有设备只可以用完全拧干的湿布清洁；
清洁过程中请勿对机械臂施加过大的力，且始终需要用手扶住需要手动清洁的部位，以免操作时使机械臂过载，造成损伤；
只有当清洁设备的所有表面完全干燥后才允许重新上电。

**警告**

不当清洁可能会造成设备损坏。

8 零点标定

8.1 简介

8.1.1 概述

本章介绍了关于零点标定的相关信息，请在标定时使用本章说明的标定工具。

8.1.2 什么是机械零点

机器人在设计时会预先定义一个初始姿态，在这个姿态下各个关节的角度为 0。从机械角度来讲，零点姿态指的是相邻连杆之间形成某个特定夹角时的姿态。从软件角度来讲，由于机器人使用编码器来记录关节角度，零点姿态是指伺服电机转动到特定编码器值时机器人的姿态。因此机械零点可以有两种解释：

- 从观察人员的角度来看，机械零点是机器人各个关节运动到特定位置时所对应的机器人姿态；
- 从控制系统的角度来看，机械零点是若干个编码器的数值。

8.1.3 什么是零点标定

零点是机器人坐标系的基准，没有零点，机器人就无法判断自身的位置，所以为了获得尽可能高的绝对定位精度，使连杆系统可以正确的反应控制系统位置和速度指令，必须对机器人进行零点标定，使机械零点和算法零点尽量接近。

通俗的讲，零点标定是利用机械本体上预先设计好的某些定位装置将机器人的各个关节旋转到特定的角度，并通知控制系统记录此时各关节电机编码器数值过程。

8.1.4 何时需要零点标定

8.1.4.1 机械传动系统出现故障

在发生如下情况时，必须使用专用标定工具进行零点标定：

- 更换电机、减速器等机械系统零部件之后。
- 发生剧烈碰撞后。
- 控制系统断开时手动移动机器人关节。

8.1.4.2 编码器多圈计数器数据丢失

在发生如下情况时，可以使用专用标定工具进行零点标定

- 整个硬盘系统重新安装。
- 编码器电池更换后。

8.2 标定方法

8.2.1 软标定

软标定是指一种快速标定机器人零点的方法，xMate ER3 Pro 柔性协作机器人在机器人本体各关节处留有视觉标定三角槽，缓慢转动关节，当关节两侧的三角槽对齐时，则标志着该关节的机械零点位置确定。例如图 8-1 一轴视觉标定三角对齐举例所示。

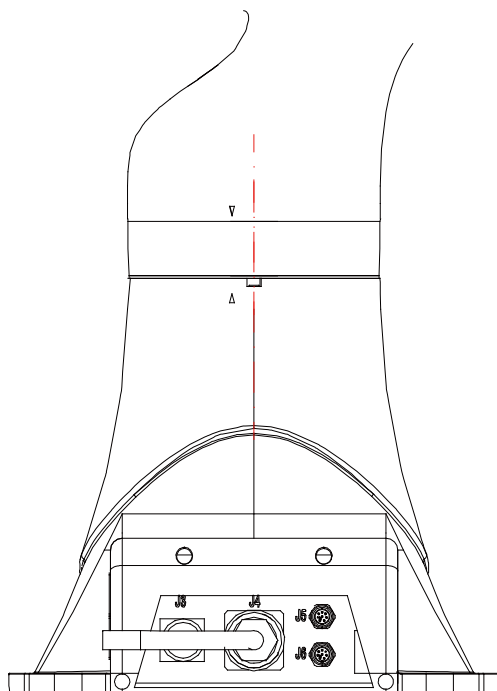


图 8-1 一轴视觉标定三角对齐举例

8.2.2 机械标定

xMate ER3 Pro机器人第一轴至第四轴采用销钉与键槽配合的标定方式，第五轴至第七轴采用键槽标定方式。每次只允许标定一个轴，具体操作过程如下：

步骤 1：取下橡胶圈

xMate ER3 Pro机器人本体各轴回转位置装有黑色橡胶套，标定前需将各轴的橡胶套拨放至连杆上，见下图 8-2 步骤 1

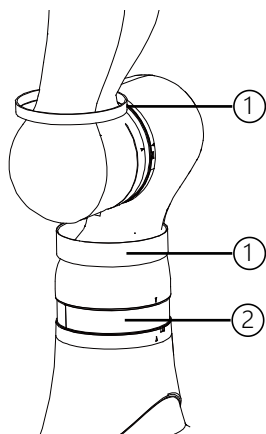


图 8-2 步骤 1

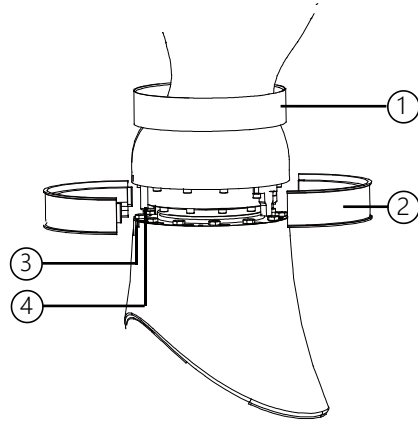


图 8-3 步骤 2

步骤 2：取下一轴位置塑料壳

一轴位置塑料壳可按照图示方向取下，漏出标定销，见下图 8-3 步骤 2。

步骤 3：标定一轴

缓慢旋转一轴，当标定销对准标定槽孔时，利用专用标定工具按照图示方向尝试插入槽孔和销轴中，若未能同时插入销轴和槽孔，则继续缓慢旋转一轴调整，直至同时插入时，认为该轴零点机械标定完成。

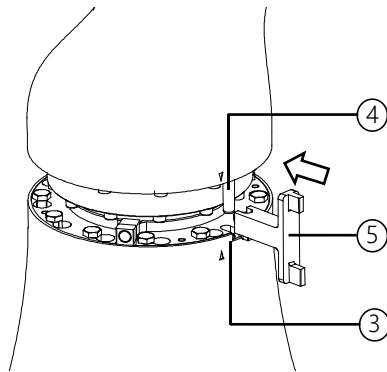


图 8-4 步骤 3

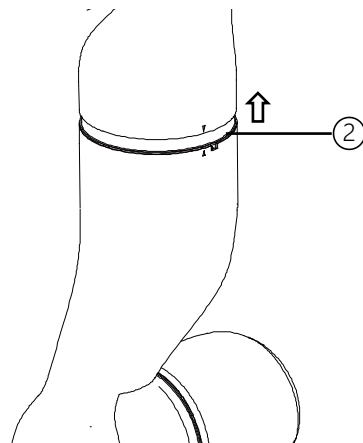


图 8-5 步骤 4

步骤 4：标定二到四轴

将二到四轴的塑料环按照图示方向推进连杆后，同样按照步骤 3 的方式进行标定。

步骤 5：标定五到七轴

参照步骤 3 标定五轴到七轴，注意专用标定工具的使用方向与步骤 3 相反。

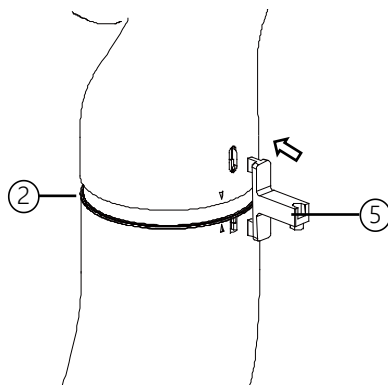


图 8-6 步骤 5

标号	注释
1	橡胶圈
2	塑料壳
3	标定槽
4	标定销
5	专用标定工具

**警告**

注意机械零点标定结束后，务必将拆卸的塑料壳与橡胶圈还原为标定前的状态，专用标定工具从相应的标定键槽中取出，机械标定过程结束后，请务必检查机器人本体状态，防止发生意外。

9 停用

9.1 停用机器人

机器人的停用、存储和处置必须遵守国家特定的法律、法规和标准。

9.2 电池

电池的处理参照本手册 7.3.1.1 节。

9.3 回收

请联系我们进行回收。

10 修订记录

版本	日期	修订内容
A	2024.1.16	初版发行
B	2024.4.27	1. 修改“图 6-3 供电接口”，增加视角方向 2. 修改“图 6-20 电源输出接口示意图”，增加视角方向

ROKAE 珞石

轻型工业机器人专家

北京总部：

北京市海淀区上地四街一号院四号楼

山东分公司：

济宁市邹城市中心店镇机电产业园恒丰路888号

苏州分公司：

苏州工业园区星湖街328号创意产业园1-A1F

深圳分公司：

深圳市宝安区中粮福安机器人智造产业园10栋1楼

网址：<http://www.rokae.com>

TEL：400-010-8700



公众号：ROKAE珞石

微信号：Rokae-tech